







PRESS RELEASE (2021/05/12)

エクソソームの形状分布解析に成功 ~新しいがん診断指標として期待~


九州大学先導物質化学研究所の龍崎奏助教・玉田薫教授、名古屋大学大学院工学研究科生命分 子工学専攻の安井隆雄准教授・馬場嘉信教授、大阪大学産業科学研究所の筒井真楠准教授・谷口 正輝教授・川合知二招聘教授、東京医科大学医学総合研究所の落谷孝広教授らの共同研究グルー プは、体液中に存在するエクソソーム(※1)と呼ばれる生体粒子の形状分布が、がん診断の新し い指標として使える可能性を発見しました。

エクソソームとは細胞から分泌される直径 100 nm (※2) 程の粒子で、血液や尿などの体液中 に存在しています。これまで電子顕微鏡(※3)によって様々な形を有するエクソソームが観察さ れてきましたが、溶液中(体液中)に分散しているエクソソームの形状を計測する技術はありま せんでした。今回、当研究グループは、独自に開発してきたナノポアデバイス(※4)と呼ばれる 1 粒子形状解析技術を用いることで、肝臓がん細胞、乳がん細胞、大腸がん細胞、乳腺細胞由来 のエクソソームの形状分布を計測することに成功し、さらにその形状分布がそれぞれ異なってい ることを発見しました。例えば、肝臓がん細胞由来のエクソソームは、球状粒子とラグビーボー ルのような楕円球状の粒子が混在していましたが、乳がん細胞由来のエクソソームは球状粒子の みでした。また、乳がん患者と健常者の血中エクソソームを比較したところ、異なった形状分布 をしており、今回の実験では乳がん患者と健常者の識別が可能でした。今後、さらに様々なエク ソソームを計測する必要がありますが、本研究により、体液中エクソソームの形状分布を調べる ことで体内のがんを検出し、さらにそのがんの種類も特定できる可能性が示唆されました。

本研究成果は、2021 年 4 月 28 日(米国東部時間)に、アメリカ化学会(ACS)が出版する 「Analytical Chemistry」 に Rapid discrimination of extracellular vesicles by shape distribution analysis というタイトルで公開されました。本研究は、主に科学技術振興機構(JST) さきがけ (JPMJPR17HC)と日本学術振興会科学研究費(15H05417)の支援を受けて行われました。なお、用 語解説等は別紙を参照。

研究者からひとこと:

今回の結果は、物理学や医 学など様々な分野の先生方 と共同研究させて頂くこと で得られた研究成果です。 今後も多角的な視点をもっ て、簡単にがんを見つけら れる検査技術の確立に取り 組んでいきます。

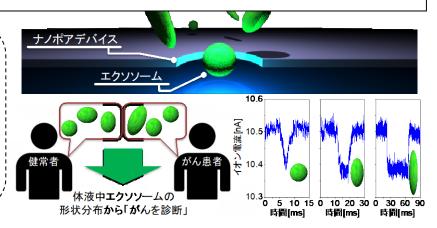



龍崎 奏 助教

(参考図) 本研究の概略図。ナノポアデバイスはナノスケールの穴(ナ ノポア)に粒子を通過させ、その際にナノポアを流れているイオン電 流の変化(図右下)から通過粒子の形状を解析します。今回はこの技 術でエクソソームの形状分布を計測し、最終的に体液中のエクソソー ム形状分布からがんを検出できる可能性が示唆されました。

<今後の展開>

今回の実験では乳がん患者と健常者の血中エクソソームを計測しました。形状分布解析によって識別は可能でしたが、バイオセンサーとして精度を評価するためには、さらに数多くの検体を計測する必要があります。今後は様々な血中エクソソームを計測し、バイオセンサーとしての技術確立を目指していきます。また、今回の実験では3種類のがん細胞(肝臓がん細胞、乳がん細胞、大腸がん細胞)がそれぞれ異なるエクソソーム形状分布を有していたため、がんの検出だけではなく、がん種を特定する観点からもバイオセンサーの精度評価を行なっていきます。本技術はエクソソームに内包されている miRNA を用いたがん検査方法に比べ計測時間が短いため、より簡便な技術として期待されています。

〈用語説明〉

(※1) エクソソーム

エクソソーム (細胞外小胞、以下 EV) は細胞からの分泌物で、直径 100 nm ほどの脂質二重膜小胞である。近年の研究から、EV は細胞間コミュニケーションに関与していることが明らかとなり、分泌元の細胞情報を持っていることから、がん細胞のバイオマーカーとして注目を集めている。特に EV の中に含まれている miRNA を用いたバイオセンサー開発では、実際にいくつかのがんを検出することに成功している。また、形状や硬さなどの物理的な特徴についても注目を集めているが、体液中に分散している EV の形状や硬さを計測することは技術的に難しいため、これら物理的特徴に関しては未解明な部分が多い。

(※2) nm(ナノメートル)

1 nm = 1/1000000000 m(10 億分の 1 メートル)

(※3)電子顕微鏡

通常の顕微鏡(光学顕微鏡)では光を用いて観察を行うが、電子顕微鏡では光の代わりに電子(電子線)を用いる。原理的に光よりも電子を用いることでより小さい構造が観察できる。

(※4)ナノポアデバイス

ナノポアデバイスは、革新的な 1 分子/1 粒子解析技術として期待されている。ナノポアデバイスの構造は、ナノポアの上下にイオン電流計測および電気泳動用の電極が設けられ、ナノポアと電極はともに KCI などの電解質溶液で満たされている。ナノポア内に粒子が無ければ、ナノポアを介して電極間にイオン電流が流れ、電気泳動により粒子がナノポア内に入ると、一部のイオン電流が粒子によって遮断されイオン電流が減少する。この減少量がナノポア内の粒子体積に比例するため、ナノポアの厚みが通過粒子よりも十分に薄い場合、通過粒子の連続的な断面体積情報がイオン電流から算出され、そこから粒子形状を定量的に求めることが可能となる(図 1)。この形状解析技術は当研究グループによって確立してきた独自技術である。1.2

- 1. S. Ryuzaki, et al., Nanotechnology 2017, 28, 155501.
- 2. M. Tsutsui, et al., Sci. Rep. 2017, 7, 17371.

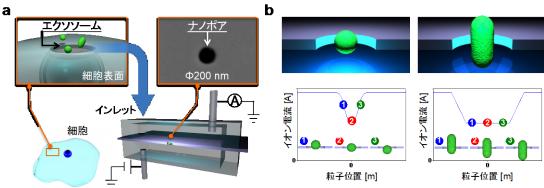


図 1. a: ナノポアデバイスの概略図. 細胞からエクソソームを回収し、ナノポアデバイスのインレットからエクソソーム分散溶液を流す。電気泳動によってエクソソームがナノポアを通過する。その際にイオン電流を計測。b:ナノポアデバイスによる1粒子形状解析の概略図. 粒子がナノポアを通過する様子(上)と粒子のナノポア通過に伴うイオン電流変化のイメージ図(下).

【研究グループ】

- ·九州大学 先導物質化学研究所 助教 龍崎 奏
- ·名古屋大学 大学院工学研究科 准教授 安井 隆雄
- ·大阪大学 産業科学研究所 教授 谷口 正輝
- ·大阪大学 産業科学研究所 招聘教授 川合 知二
- ·東京医科大学 医学総合研究所 分子細胞治療研究部門 教授 落谷 孝広

【論文情報】

タイトル: Rapid discrimination of extracellular vesicles by shape distribution analysis

掲載誌: Analytical Chemistry

著 名:Sou Ryuzaki, Takao Yasui, Makusu Tsutsui, Kazumichi Yokota, Yuki Komoto, Piyawan Paisrisarn, Noritada Kaji, Daisuke Ito, Kaoru Tamada, Takahiro Ochiya,

Masateru Taniguchi, Yoshinobu Baba, Tomoji Kawai

D 0 I: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c00258

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

九州大学 先導物質化学研究所 助教 龍崎 奏

TEL: 092-802-6231

Mail: ryuzaki@ms.ifoc.kyushu-u.ac.jp

<報道に関すること>

九州大学 広報室

Mail: koho@jimu.kyushu-u.ac.jp

名古屋大学 管理部総務課 広報室

TEL: 052-789-3058 FAX: 052-789-2019 Mail: nu_research@adm. nagoya-u. ac. jp

大阪大学 産業科学研究所 広報室

TEL: 06-6879-8524

Mail: kouhou-staff@ sanken.osaka-u.ac.jp

東京医科大学 総務部 広報·社会連携推進課

TEL: 03-3351-6141 (代表)

Mail: d-koho@tokyo-med.ac.jp